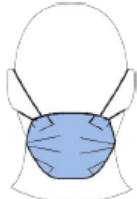


¿QUÉ ES QUÉ?

Mascarilla + Filtros de partículas	Mascarilla autofiltrante o media máscara filtrante contra partículas	Mascarilla quirúrgica	Mascarilla dual
			
Uso previsto: PROTEGER DE LA INHALACION DE PARTICULAS PELIGROSAS A LA PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA.	Uso previsto: PROTEGER DE LA INHALACION DE PARTICULAS PELIGROSAS A LA PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA.	Uso previsto: EVITAR LA TRANSMISION DE AGENTES INFECCIOSOS PROCEDENTES DE LA PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA. ADICIONALMENTE LAS QUE LLEVEN EL MARCADO IIR PUEDEN PROPORCIONAR PROTECCION FRENTE A SALPICADURAS DE FLUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS.	Uso previsto: MASCARILLA QUIRURGICA + AUTOFILTRANTE CONTRA PARTICULAS.
Certificación: CONFORME REGLAMENTO (UE) 2016/425 RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI).	Certificación: CONFORME REGLAMENTO (UE) 2016/425 RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.	Certificación: CONFORME DIRECTIVA 93/42/CEE, RELATIVA A LOS PRODUCTOS SANITARIOS. A PARTIR DEL 26 DE MAYO DE 2020 SERA DE APLICACION EL REGLAMENTO (EU) 2017/745 SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS (PS).	Certificación: CONFORME AMBAS REGLAMENTACIONES.
Normas armonizadas: EN 140:1998 (MASCARILLA). EN 143:2000 Y EN 143:2000/A1:2006 (FILTRO).	Normas armonizadas: EN 149:2001+A1.	Normas armonizadas: EN 14683:2019+AC:2019.	Normas armonizadas: EN 14683:2019+AC:2019 . EN 149:2001+A1.
Ajuste facial: PIEZA FACIAL HERMETICA. ENSAYO DE AJUSTE REQUERIDO .	Ajuste facial: PIEZA FACIAL HERMETICA. ENSAYO DE AJUSTE REQUERIDO.	Ajuste facial: PIEZA FACIAL NO HERMETICA. ENSAYO DE AJUSTE NO REQUERIDO.	Ajuste facial: PIEZA FACIAL HERMETICA. ENSAYO DE AJUSTE REQUERIDO.
Tipos/Clasificación: MASCARILLA: NO APLICABLE. FILTRO: P1, P2, P3.	Tipos/Clasificación: FFP1, FFP2, FFP3.	Tipos/Clasificación: I, II, IIR.	Tipos/Clasificación: FFP1, FFP2, FFP3 (COMO EPI). I, II, IIR (COMO PS).
Limitaciones de uso: UTILIZADOS LOS DOS EQUIPOS CORRECTAMENTE PROPORCIONAN UN NIVEL ACEPTABLE DE PROTECCION FRENTE A LA INHALACION DE PARTICULAS. NO SE CONSIDERA PRODUCTO SANITARIO. REUTILIZABLE.	Limitaciones de uso: UTILIZADA CORRECTAMENTE PROPORCIONA UN NIVEL ACEPTABLE DE PROTECCION FRENTE A LA INHALACION DE PARTICULAS. NO SE CONSIDERA PRODUCTO SANITARIO. DESECHABLE O REUTILIZABLE.	Limitaciones de uso: NO PROPORCIONA UN NIVEL FIABLE DE PROTECCION FRENTE A LA INHALACION DE PARTICULAS. NO SE CONSIDERA EPI. DESECHABLE.	Limitaciones de uso: UTILIZADA CORRECTAMENTE PROPORCIONA UN NIVEL ACEPTABLE DE PROTECCION FRENTE A LA INHALACION DE PARTICULAS. SE CONSIDERA PRODUCTO SANITARIO Y EPI.
Posibilidad de limpieza y desinfección: MASCARILLA: SI. FILTRO: NO.	Posibilidad de limpieza y desinfección: SOLO LAS MARCADAS CON LA LETRA R (REUTILIZABLE MAS DE UN TURNO DE TRABAJO). SOLO SE LIMPIA Y DESINFECTA EL AJUSTE CON LA CARA, NO EL MATERIAL FILTRANTE.	Posibilidad de limpieza y desinfección: NO.	Posibilidad de limpieza y desinfección: NO APLICABLE.